

DÉTÉRGENT - DÉSINFECTANT
DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE IIa



UMONIUM³⁸

MEDICAL TISSUES



- ✓ FORMULE SANS
- COMPOSANT CMR**
 - PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

“ Une désinfection instantanée
à portée de main ”

SPORICIDE



UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES est la première lingette nettoyante et désinfectante sporicide. Elle tue les germes dès 5 secondes de temps de contact. Elle peut être utilisée pour nettoyer et désinfecter des matériaux fragiles comme la fibre optique, le polycarbonate, le latex, les sondes vaginales, les endoscopes, l'instrumentation en unité d'intervention externe, ... Ultra résistante et humide, chaque lingette permet la désinfection d'une surface de 3m².

** Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique





UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES

1 lingette (20 x 20 cm) = 3m²



✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR**
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux non invasifs.

COMPOSITION

Lingettes non tissées imbibées d'une solution d'UMONIUM³⁸ **EQUIPMENTS**: N-benzyl-N-dodecyl-N, N-diméthyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-diméthyl- N-tétradécyl-ammonium chloride. 11,9g/L.

- Lingettes blanches 20 cm x 20 cm : 50% pulpe de bois et 50% polyester.
- Lingettes bleues 15 cm x 15 cm : 100% polypropylène.

STANDARDS NORMATIFS

- L'activité bactéricide, fongicide et sporicide de la lingette imbibée est validée selon les normes ASTM 2967-15, EN 16615
- L'activité bactéricide, fongicide, lévuricide, mycobactéricide et virucide de la solution d'imprégnation est validée selon les normes EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 et EN 14476
- Conforme à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (annexe II, excl. §4)
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015/EN ISO 13485:2016

MODE D'EMPLOI

Nettoyage/Pré-désinfection: Prélever une lingette humide. Procéder à l'essuyage humide pour éliminer toute salissure.

Désinfection: Prélever une nouvelle lingette humide. Essuyer les dispositifs propres pendant au minimum 5 secondes. Laisser sécher ou rincer à l'eau* (ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau*) si nécessaire. Bien refermer le couvercle après utilisation.



PROCÉDURE D'UTILISATION



ÉTAPE 1 : NETTOYAGE/PRÉ-DÉSINFECTION



Prélever une lingette humide



Procéder à l'essuyage humide pour éliminer toute salissure


ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION



Prélever une nouvelle lingette humide



Essuyer les dispositifs propres pendant au minimum 5 secondes

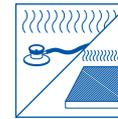

Laisser sécher **OU** rincer à l'eau* (ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau*) si nécessaire



ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 10760	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
PF 10774	Boîte de 95 lingettes (15 x 15 cm)	6 x 95
EMB 5206	Support inox (95 lingettes)	1 pièce
PF 10761	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1

* Eau potable à température ambiante

** Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique

FP00050 FR - Ed. 3.8 - 06/2021

www.huckerts.net



BELGIQUE
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel: +32 (0)67 89 41 00

FRANCE
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel: +33 (0)1 3976 1505

G.D. LUXEMBOURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel: +352 26 39 42 60

ITALIE
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel: +39 0744 80 03 87

SINGAPOUR
#01-01, 100 Eunoss Avenue 7
Singapore 409572
Tel: +65 983 45 333

info@huckerts.net



UMONIUM³⁸ est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International